

دستور العمل استفاده از دستگاه گوش سوراخ کن EXXL

آماده سازی برای سوراخ کردن گوش

- ۱- مشتری را روی صندلی بنشانید.
- ۲- در صورت نیاز موهای مشتری را از محل سوراخ کردن گوش دور نمائید.
- ۳- محل سوراخ کردن گوش را با پنبه الکل به خوبی تمیز نمائید.
- ۴- برای علامت گذاری گوش مطابق دستور زیر عمل کنید:
 - الف - اگر مشتری گوشواره دارد آنرا خارج نمائید.
 - ب - محل سوراخ کردن گوش را فقط با ماژیک مخصوص علامت گذاری کنید.
- ۵- قسمت پشتی گوشواره را در بخش جلوئی دستگاه قرار دهید (سعی کنید دست خود را به حلقه های پشتی تماس ندهید) سپس کپسول گوشواره را درون دستگاه بگذارید.

مطمئن شوید که کپسول ها به خوبی و تا انتها درون دستگاه قرار گرفته باشد. در غیر این صورت گوشواره دقیقاً در قسمت پشتی قرار نرفته و عمل سوراخ کردن ناقص انجام میشود.
- ۶- لاله گوش را میان کپسول گوشواره و قسمت جلوئی دستگاه قرار دهید
- ۷- دست خود را نزدیک محل سوراخ کردن گوش قرار دهید و کمک کنید تا قسمت داخلی کپسول درست مقابل علامت قرار بگیرد. اکنون آرام و با ملایمت دستگاه را فشار دهید تا قسمت تیز کپسول گوشواره روی علامت قرار بگیرد.
- ۸- دستگاه را محکم فشار دهید تا گوشواره کاملاً در لاله گوش فرو رود و مطمئن شوید که عملیات کامل انجام شده است .
- ۹- قسمت پروانه ائی پشت گوشواره را بعد از سوراخ کردن طوری تنظیم کنید که لاله گوش تحت فشار نباشد و صدای کلیک جا افتادن گوشواره و قسمت پروانه ائی پشت گوش شنیده شود.



1.Operator cleanse hands

1

2.Disinfect the ears with alcohol swabs




2

3. Mark the ear, avoid piecing in the shaded area.




3

4.Insert earring clutch capsule

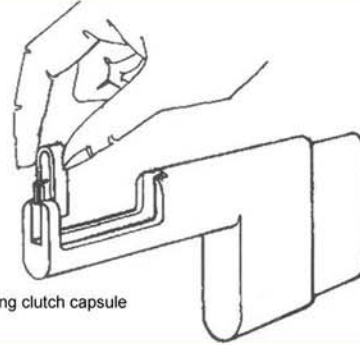


4

5.Insert earring capsule

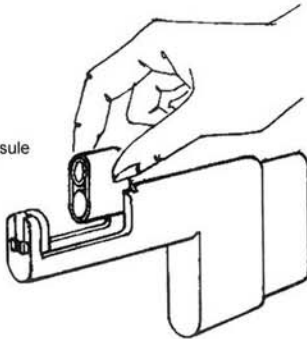


5

6.Make sure both capsules are pushed completely down into the bottom of the instrument

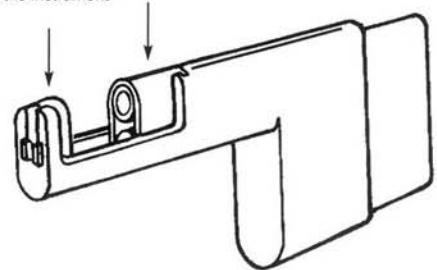


6

7.Hold the instrument as illustrated

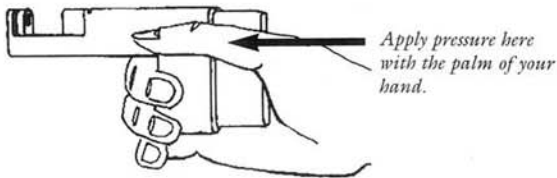

7

8.Position ear between front and rear capsules, the back of ear should be resting against the earring clutch capsule. Hold the upper portion of the ear between your fingers for steady and accurate piercing. Hold the instrument level. Keep hands clear from the piercing area.

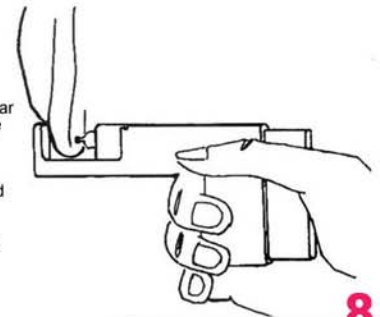


8

9. SLOWLY and GENTLY squeeze the instrument handle until the tip of the inner capsule barely touches the marked dot of the ear.

The instrument may be turned sideways to make 2nd, 3rd or cartilage piercing easier.

(Stand to the side of the customer and turn the instrument sideways for cartilage ear piercing).

No extra pressure is required for a cartilage piercing.

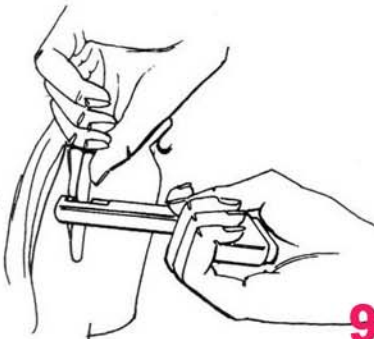


9

10.Firmly squeeze instrument handle until it is fully depressed to ensure the earring goes completely through the ear and engages with the earring clutch. Listen for a CLICK which indicates the earring has been released from the capsule and has been engaged with the earring clutch.




10

11. Completely release hand pressure and gently tip the instrument down and away from the ear.

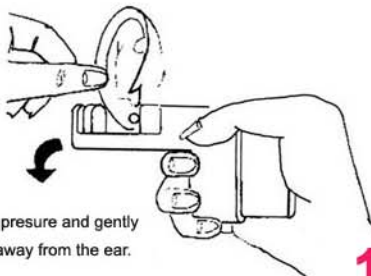

11

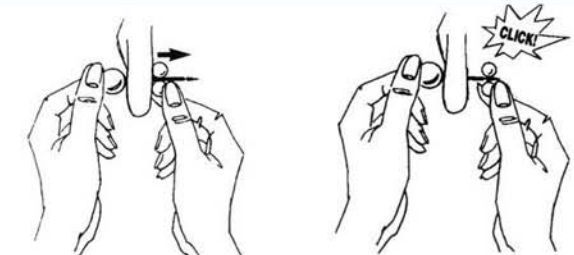

12.Advise the customer that when he or she gets home, wash hands and hold the front of the earring and pull the back gently into the safety notch. This will allow more space at the back of the ear to enhance air circulation which is crucial for healthy healing.

12